●ご使用前に、この取扱説明書をよく お読みのうえ、商品の特性を十分に 理解してからご使用ください。 ●常に、この取扱説明書はお手元に置 き、必要に応じてお読みください。

アルケア株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル0120-770175 (土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30

ホームページからもお問い合わせいただけます http://www.alcare.co.jp

《セルケア2》は、排泄物を溜めるストーマ袋と、 皮膚に固定する粘着部分の面板が独立した 二品系(ツーピース)装具です。

面板はあらかじめカットされたプレカットタイプを標準とし、 ストーマ袋は生活のシーンに合わせて選択ができます。 安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、

この取扱説明書に従いご使用ください。 なお、商品についてご不明な点は アルケア株式会社 お客様相談室まで

お問い合わせください。

# はじめに

# /ラット面板 換目安:2~5日 取り外し用、 剥離フィルム Fc 口型间板 交換目安:2~5日

セルケア2の種類と各部の名称

取り外し用 凸型面板 ストーマ周囲にシワや凹凸がある方、平坦

または陥没ぎみのストーマの方用です。

▶ストーマ袋の装着方法(共通)

コロ/イレオストミー用 コロ/イレオストミー用 取り外し用 フラップ < 面ファスナー 面ファスナー (フック面) mamamam + フィルター

クリップ コロストミー用 折り上げライン – 口具キャップ ↓取り外し用 「Dfをお使いのお客様へ

- 逆流防止弁 ダブルロック 接続チューブ

BC 入浴用キャップ 入浴時などに最適な肌色のコンパクトな キャップです。

●入浴用装具

### 使用手順 ▶準備(共通) ●必要物品を用意

●ご使用の面板とストーマ袋

●ストーマメジャーまたは

カッティングゲージ●石鹸

●ガーゼ●ティッシュ●ゴミ

袋●ぬるま湯●ハサミ(フ

リーカットの場合)●細い油

性ペン(フリーカットの場合)

します

## 2面板を剥がします ※イラストはFです。

面板の上側を軽く持ち上げ

すき間に指を入れてお腹の皮

膚を押さえながら、下向きに

ゆっくりやさしく剥がします。

\* 面板が皮膚に密着して剥がれない時

は、剥離剤(プロケアーリムーバー

ら剥がすとよいでしょう。


ご)で、皮膚と面板の間を濡らしなか

\*使用済みの面板は、新聞紙などに包

通常、「燃えないゴミ」の扱いですが

地域により異なる場合もありますの

で、詳しくは各自治体へご確認くだ

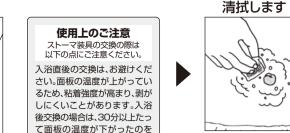

確認のうえ、行ってください。

とストーマ周囲に付着した排 泄物をティッシュ等で拭き取 ります。その後、石鹸とぬるま 湯をしみ込ませたガーゼでス トーマ周囲をよく洗います。

この時、粘着を悪くする皮 膚表面の油分を十分に取り 除くようにしてください。 石鹸成分は十分に洗い流す ようにしてください。面板 が付きにくくなることや剥 がれの原因となります。

装具を装着する前に、ストーマ

❸ ストーマ周囲を

▶排液バッグとの接続方法 <D キャップの場合>

就寝時など、排液バッグを併用される場合、下記の通り接続してください。

その後、皮膚をよく乾かします。 \*ドライヤーの熱風はストーマに刺激を 与えますので、使用は避けましょう。

●ウロストミーの方の場合

清拭の間にも尿が絶えず出 ていますので、ロールガーゼ

(ガーゼを丸めてテープで止 めたもの)で尿を吸い取りな がら清拭を行うとスムーズ

この矢印イトが上にくるように 貼付してください。 右手側の方は PHIT

> 剥離フィルムに印字されてい る矢印に合わせて、面板の方 向を確認してください。

4 面板を貼る位置を

面板裏面(剥離フィルム)

右手側にストーマがある方は、

確認します

# ÄLCARE

## ●フリーカットの場合 ※イラストはFです。



**●** ストーマの大きさを 測ります

ストーマの大きさを測り、 カッティングゲージにストー マと同じ大きさの穴を開けま す。穴はゲージの中央に開け るようにしてください。この カッティングゲージは型紙と してとっておきます。 \*ストーマの大きさは変動することがありま す。1ケ月に1回は大きさを測り、常に正し

いストーマサイズを知っておきましょう。

このような場合には ●ストーマ周囲にシワや凹凸がある場合

] 別売りの皮膚保護剤(板状 ペースト状など)で、皮膚表 面を整えてから面板を貼っ 」 てください。またはFcタイ プの面板をご使用ください。

2面板に穴を開けます

穴を開けたカッティングゲー

ジを裏返し、面板の剥離フィ

ルム側に重ね合わせて、面板

す。その線よりも1~2mm程

度大きめに面板を切ります

\*この際、ストーマを傷つけないよう

に切り口を指でこすって滑らかにし

ておきましょう。

# ●平坦または陥没ぎみのストーマの場合

### 〕面板の穴をストーマより2~3mr 大きめに開け、別売りの皮膚保護剤 (プロケアーMFパテなど)で、すき間 <sup>/</sup> / を埋めてください。またはFcタイフ

の面板をご使用ください。

❸ 穴の大きさを

剥離フィルムを剥がす前に 面板をストーマにあてて、穴 の大きさが適切かどうかを に穴の大きさを書き写しま 確認します。

うにストーマ周囲から外側 知っておきましょう。

### 使用手順 ▶面板の貼り方 ※フリーカットをご使用の方は①から、プレカットをご使用の方は④からお読みください。 ●フリーカット、プレカット共通 \*/ラストはFです。

⑥面板を貼り、

よく押さえます

腹のシワを伸ばすようにし

て貼付します。面板を貼付し

たら、皮膚にきちんと付くよ

すので、併用しないでください。




② 剥離フィルムを 剥がします

タブを持って面板の剥離 面板の上下を確認のうえ、お フィルムを剥がします。 \*剥離フィルムに印字されている矢印 に合わせて、面板の方向を確認して \*ストーマの大きさは変動することが あります。1ケ月に1回は大きさを測

に向けて、手で押さえながら 十分に密着させてください。 \*面板を貼付するときは、皮膚を伸ば し過ぎないようにしましょう。 \* 軟膏等は粘着力低下の原因となりま

# ●ウロストミーの方の場合

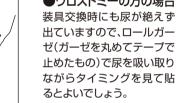

回転させます

ウロストミーパウチの排出口

# このような場合には ●ストーマサイズを計測する場合

ストーマサイズの計測には、パッ ケージ内のストーマメジャーまた はカッティングゲージをご利用く

●ストーマ袋の位置を 合わせます ストーマ袋を持ち、面板とお

およその位置で重ね合わせ、 上下左右にずれないことを 確認します。

\*リング部分に排泄物などが付着して いる場合は、しっかり取り除いてくだ \*《セルケア2》以外の装具との組み合

2 ストーマ袋を はめ合わせます リングの位置合わせができ たら、親指と他の指ではさ むようにして、指を移動させ

ながらはめ合わせます。 最後に、袋の上からリング をなぞったり、軽く袋を 引っ張るようにして、はめ

通気回復フィルターについてのご注意

●TDf/Df/Cf/D キャップをお使いの場合 ※ィラストはCfです。

●ストーマ袋

ストーマ袋の取り外し用タブ をストーマ袋と一緒に持ち

もう一方の手で面板側の取 り外し用タブを押さえなが ら、ゆっくりストーマ袋をめ くるように外してください。 \*使用済みのストーマ袋は、排泄物を 合わせが正確にできている トイレに流した後、新聞紙などに包 み、ゴミ袋に入れてお捨てください ことを確認してください。 通常、「燃えないゴミ」の扱いですが 地域により異なる場合もあります ので、詳しくは各自治体へご確認・

外し方

## ▶排出口の開閉方法 <Dfの場合> ●Dfの排出口の閉じ方

汚すおそれがあります。水分や油分を十分に拭き取ってからご使用ください。



❶ クリップを開きます 図のようにストッパーを押し ながら引き上げて、クリップ

● クリップを外します

しっかりとストーマ袋を押

ストッパーを押しながらク 巻きつけます リップを閉じます。 引き上げたアーム部分にス トーマ袋のクリップラインを \*最後にクリップがきちんと閉じて いるか確認してください。 合わせて一重に巻きつけます。 \* クリップのカーブが体に合うように 向けてください。

●面ファスナーのループ面・フック面に潤滑油や水が付着した状態で使用すると、接着力が弱まったり、衣類を

# ●Dfの排出口の開け方/排出方法

❸ クリップを閉じます

イレオストミー用

- 逆流防止弁

❸ ストーマ袋の先端を 2 便を排出します ストーマ袋の先端に便が付着 便の排出が済んだら、排出口 部分をトイレットペーパー

さえ、クリップのストッパーし、臭いモレの原因にならない を押しながら引き下げてク ように、排出口を外側に折り返 リップを外します。 します。排出口を下に向けて、ス \*ストーマ袋を押さえておくことで、 トーマ袋内の便を排出します。 クリップを外した際に、急に便が排出 \*ストーマ袋の折り返しがしやすい ように裾広がりのベルボトム形状

になっています。

### ▶排出口の開閉方法 <TDfの場合> ●TDfの排出口の閉じ方



折り上げてください。 \*折り上げにゆるみやシワがあると

折り上げラインに沿って、折フック面にフラップのルーフ り上げると面ファスナーの 面を重ねてからしっかりと 便や臭いモレの原因になります。

フック面が表に出てきます。 押し付けてください。 ●TDfの排出口の開け方/排出方法

🕦 フラップ部分を 2折り上げた部分を

剥がします 片手でプレート部を持ちなが ら、フラップを左右いずれか の端から注意深く持ち上げて 剥がしてください。

排出口を上に向けながら、折 り上げた部分を順番に開い てください。最後まで開き、 末端のプレートをV字に折り 曲げると排出口が開いた状 態で保持され、排出と拭き取 りが容易にできます。

\*V字にしっかりと折って

クセをつけます。

# ❸ 便を排出します

を重ねます

ゆっくりと排出口をトイレに 向け、便を排出してください。 \*排出口付近に便が残っていると、便な すので、排出口付近はきれいに拭き 取ってから閉じてください。

## 排泄物に残りかすが多く、詰 まり等によって、口具部分か 具の上方をカットして、下部

### め具に止め、排出口をトイレ 口部分をトイレットペー に向けて便を排出します。 パー等で拭き、キャップを付 \*排泄物に残りかすが多い場合には、 けます。 口具部分を指先で押して、便をしぼ

キャップを口具キャップ止

下部開放型ストーマ袋とし

て使用する場合は、付属のク

リップをお使いください。

\* クリップの使い方は「排出口の開閉フ

法 <Dfの場合>」をご覧ください。

2 便を排出します

## このような場合には

キャップを外します

排出口を上に向け、便が出て

こないように注意しながら

キャップを外します。

●排泄物に残りかすが多く、詰まりやすい場合

▶排出口の開閉方法 <D キャップの場合>

●ロ キャップの排出方法/排出口の閉じた

らの排出が困難な場合は、口 開放型ストーマ袋として使 用することができます。


逆流防止弁に繊維状の固形物が

引っかかり、便が流れ落ちにくい場

合は、逆流防止弁の上あたりから下


へしぼり出してください。


具キャップを外します。 ●ストーマ袋内の便が流れ 落ちにくい場合

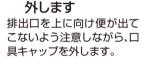

口具

●□具キャップを

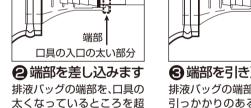

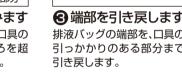

# 引っかかりのある部分まで えるまで差し込みます。

## ご紹介 ※別売の<排液バッグ>(当社製品)の場合、 「ッグの先端が口具にぴったりフィット 、確実な固定が可能です。

使用上のご注意 排液バッグに接続の場合、詰ま Oにご注意ください。 り、流れにくい場合があります。 併用はお避けください。

# 排泄物が泥状の場合など、排液 ッグのチューブ部分に詰ま 流れが悪い場合、排液バッグの

## 使用手順 ▶ 排出口の開閉方法 <Uの場合> ●排出口の閉じ方/開け方



端のキャップを外します。 \*ロックされている状態では尿はまだ 出てきません。

が必要な時にお使いください。



2尿を排出します

操作つまみを縦線のある方

向(上から見て右廻り方向)に

## ●接続チューブの付けだ



日本ヤップを付けます 排出が終わりましたら、操作 つまみを元に戻し、次に キャップを付けます。 \*キャップを先に閉めると、先端部分

# **1** コネクターを

2接続チューフ 差し込みます を差し込みます 付属の接続チューブに、ご使 用になる蓄尿バッグのコネク トミーパウチに、接続チューブを"カ

ウロストミーパウチから接 で挟み、ツメのロックを外し

続チューブ、蓄尿バッグへの てから(イラスト①)、ゆっくり接

### 次に、キャップのみを外したウロス 最後に操作つまみを縦線のある チッ"と音がするまで強く差し込み 180°回転させると、接続チュ-ます。この時、接続チューブのツメ部 ブ、蓄尿バッグへ導尿されます。 分が口具側のカサ部分にしっかり \*別売の<採尿バッグ>をご使用の場合、 と掛かっていることを確認します。

●接続チューブの外し方 2 接続チューブ


(イラスト②)。

続チューブを引き抜きます

# 日本ヤップを付けます

### フィルターは、ストーマ袋内 重要 以下のような場合は、パッケージ内のフィルターカバー るようになっています。 \* なお、フィルターは、ストーマ袋内 の排泄物がフィルターを通って外 に染み出すことがない構造になっ

に溜まったガスが徐々に抜けシールを貼って、通気孔をふさいでください。 ガスが抜けすぎる時 ガスが抜けすぎると、真空状態のようになり、ストーマから排出された便が袋 の中に落ちず、ストーマ周囲に貯留してしまうことがあります。このような場 合は、パッケージ内のフィルターカバーシールを貼って、通気孔をふさぎ、ス トーマ袋内にガスがたまるようにしてください。ストーマ袋内にガスがたまっ たらシールを剥がして、手で軽くストーマ袋を押してガスを出してください。 2入浴の時

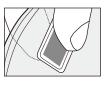

・フィルターに排泄物の付着が見られる場合は、こするようにして拭い、取り除いてください。

入浴時に外側からの水がフィルターに触れると活性炭が水を吸収してしまい、入

\*ストーマ袋を装着して入浴した場合には、入浴後、乾いたタオル等でストーマ袋に

浴後に活性炭を含んだ水が染み出すことで衣服を汚してしまう原因となります。

## 【使用上の注意】や【保管上の注意】では、危険度に応じ て次の区分をしています。 ………誤った取扱いをすると、人が軽度の損傷を負ったり、物的障害の発 生が想定される内容を示します。

で使用前には、医師または看護師の指導を受けたうえ、注意事項を熟読し、本品の特性を 十分理解してください。 誤った取扱いを行うと排泄物のモレが発生し、モレによる皮膚炎の原因ともなります。万 一、肌に合わない時は使用を中止してください。

クリップで止めます

等で拭き、折り返しを戻し

またクリップで止めます。

## 使用上の注意

# ●ストーマ周囲には軟膏等、粘着力の低下の原因となるものは塗らないでください。粘着力低下に

よるモレの原因となります。(被膜剤も、その特性上、粘着力に影響を与える場合があります。

●一度剥がした面板をもう一度貼るのはお止めください。粘着力低下によるモレの原因となります。

●装具を装着状態で折りまげないでください。ストーマ袋の穴あきによるモレの原因となります。 ●面板の粘着面が冷たくなっていると、貼り付きが悪い場合がありますので、暖かい部屋に移し、 全体が温まってからご使用ください。

●排泄物はストーマ袋に溜めすぎないようにし、1/3くらい溜まったらお捨てください。溜めすぎ ると重みによる剥がれの原因となります。

●万一、肌に合わない時は使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。

## 保管上の注意

注意 粘着力不足など品質劣化の原因となりますので、保管の際は次のことを避けてください。 ●高温(40° C以上)・多湿の場所での保管

●温度の低い場所(冷蔵庫など)での保管 ●直射日光があたる場所での保管

●大量購入による長期保管 \*箱に記載されている使用期限を必ずご確認ください。 ●面板の剥離フィルムを剥がしての保管

●圧迫がかかる場所での保管

## 廃棄上の注意

てください。装具は通常「燃えないゴミ」の扱いですが、地域により異なる場合もありますので、 詳しくは各自治体へご確認ください。

## セルケア2の種類と規格

## | 種類 | 商品コード | 穴の大きさ | ストーマ有効径 | 面板サイズ(縦×横) | ストーマ | 3 \*\*\*

			NO.	(		The result is	袋サイズ	人致
	F	Mフリー	18251	10mm <i>ф</i>	4~39mm (フリーカット)	88mm×88mm	M	. 5枚
		M16	18661	16mm <i>ф</i>	12~15mm			
		M19	18662	19mm <i>ф</i>	15~18mm			
		M22	18252	22mm <i>ф</i>	18~21mm			
		M25	18253	25mm <i>ф</i>	21~24mm			
		M28	18254	28mm <i>ф</i>	24~27mm			
		Lフリー	18255	10mm <i>ø</i>	4~49mm (フリーカット)	98mm×98mm	L	
		L32	18256	32mm <i>ф</i>	27~31mm			
		L36	18257	36mm <i>ф</i>	31~35mm			
		L40	18258	40mm <i>ф</i>	35~39mm			
		LLフリー	18259	10mm <i>ф</i>	4~69mm (フリーカット)	118mm×118mm	LL	
	Fc	M13	18387	13mm <i>ф</i>	9~12mm	- 100mm×100mm	М	
		M16	18388	16mm <i>ф</i>	12~15mm			
		M19	18389	19mm <i>ø</i>	15~18mm			
		M22	18381	22mm <i>ф</i>	18~21mm			
		M25	18382	25mm <i>ф</i>	21~24mm			
		M28	18383	28mm <i>ø</i>	24~27mm			

L36 | 18385 | 36mmφ | 31~35mm | 110mm×110mm

L32 | 18384 | 32mmφ | 27~31mm

L40 | 18386 | 40mmφ | 35~39mm

# ●ストーマ袋と入浴用キャップ


種類		商品コードNO.	袋サイズ(縦×横)	1函入
	М	18261		10村
TDf 透明	L	18262	300mm×150mm	
	LL	18263		
TDf 肌色	М	18671	300mm×150mm	
TOLME	L	18672	300111111 / 130111111	
	М	18271		
Df	L	18272	300mm×150mm	
	LL	18273		
Cf	М	18281	210mm×150mm	
	L	18282	21011111111 130111111	
	М	18911		
Ο キャップ	L	18912	346mm×148mm	
	LL	18913		
П	М	18681	260mm×150mm	
U	L	18682	260111111 / 130111111	
BC	М	18291	ドーム高さ20mm	2⊐
	L	18292	トーム同C2UIIII	

### アルケア株式会社 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階

0508-1111/4

(上から見て左廻り方向に回 転しないこと)を確認して先 180°回転させます。

●接続チューブの使い方

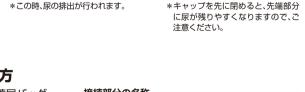


### ●導尿を止めます 操作つまみを180°(上から を引き抜きます 見て左廻り方向)回転させ、 接続チューブのハネ部を指にキャップを付けます。

導尿を止めます。

# ❸操作つまみを

方向(上から見て右廻り方向)に この接続チューブは必要ありません。

ていますので、安心してご使用いた

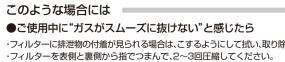

## 注意

お使いの場合は、被膜剤の取扱説明書をよく確認のうえ、ご注意ください) ●剥離フィルムを剥がした面板の表面には、指などが触れないようにご注意ください。粘着力低下 によるモレの原因となります。

●ストーマ袋内を洗浄して、繰り返し使用することはお止めください。袋の破損によるモレの原因 となります。

●フリーカットの場合、面板に開ける穴は、定められたカットラインを越えて切らないでください。 面板からのモレの原因となります。

●装具の使用日数が長くなると、粘着力低下によるモレの原因となりますので、ご注意くださ い。装具の交換日数は、発汗や排泄物等により異なりますが、2~5日が目安です。

使用済みのストーマ装具は、排泄物をトイレに流した後、新聞紙などに包み、ゴミ袋に入れてお捨